

精度，效率，性能



www.france-etuves.com



XUE系列

通用烘箱

XUE通用烘箱最高溫度 300°C


我們的XUE通用烘箱可應用於實驗室領域和所有工業領域中的以下範圍：乾燥、加熱、熱儲存、熱空氣消毒（布氏消毒）、元件老化、硬化及熱度試驗等。



新款精密乾燥箱

不鏽鋼內膽，防腐蝕構造，圓角構造方便清潔。

- * 液晶顯示智能溫控器C3030
- * 獨立電子安全溫度開關卡，帶有溫度跟隨報警
- * TWW最高溫度切斷自恢復或TWB手動恢復可設定
- * SDT跟隨設定溫度超範圍切斷
- * 故障自診并顯示，安全保護聯動
- * 獨立電子風機調速卡帶4擋風速
- * 8段可編程段（4個升溫，4個保溫），程序可循環執行1-9999次
- * 延時啟動功能
- * RS485通訊-可用於烘箱集群工作

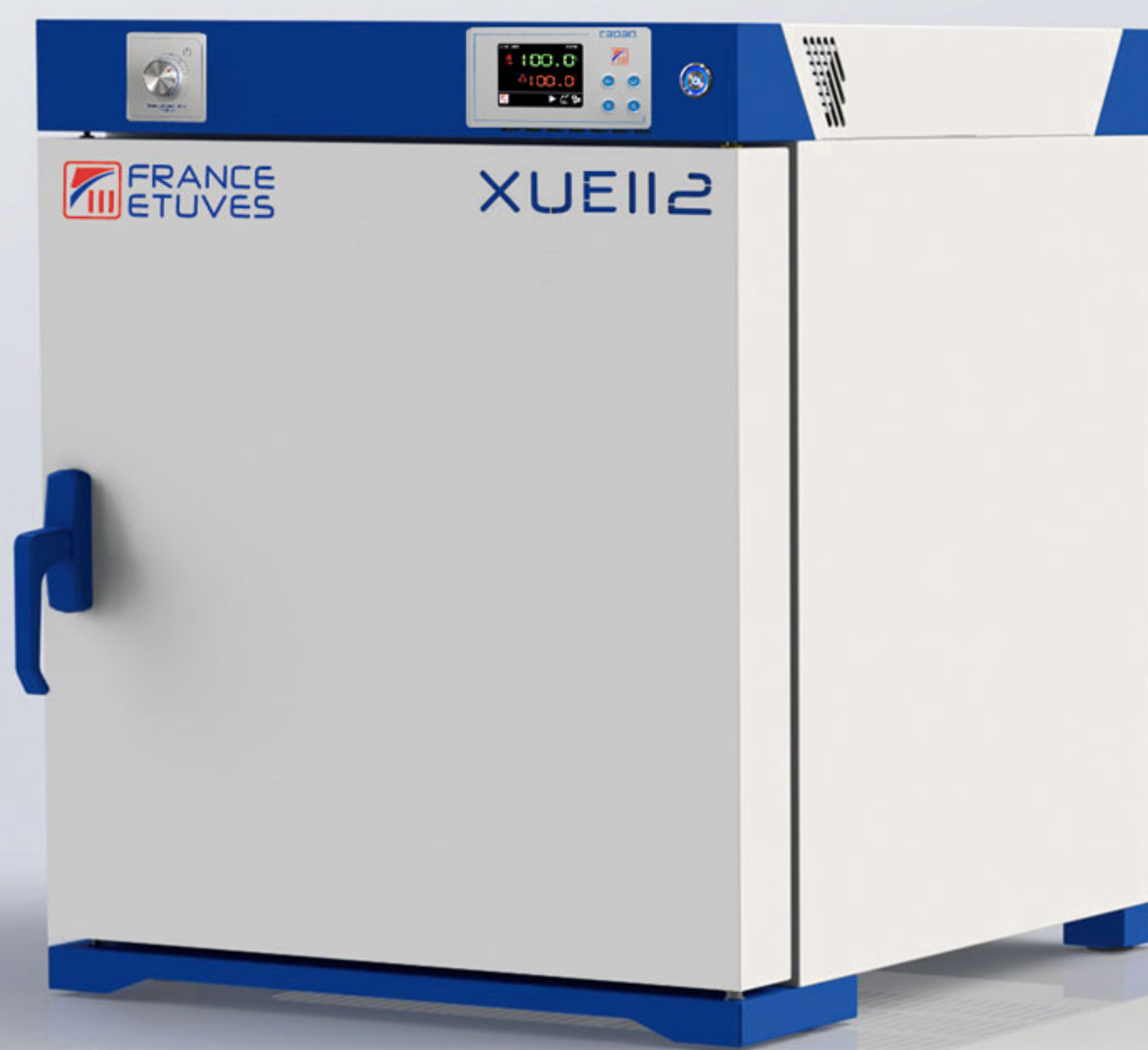

設備
隨烘箱附帶2個貨架網及防傾斜支架。
貨架網位置可隨裝載貨物進行調整。

門的密封性
帶可更換硅膠密封條。
門鎖是兩點式。

快速加熱
升溫快，發熱管處於方便空氣流通的最佳位置。

8種型號 從32L到980L供你選擇



XUE032

XUE058

XUE112

XUE225

XUE343

可選配件



1 觀察窗



2 電磁鎖



3 C6000觸屏溫控器



4 充氮裝置




5 廢氣助排機



6 降溫風機




7 直徑60mm側開孔

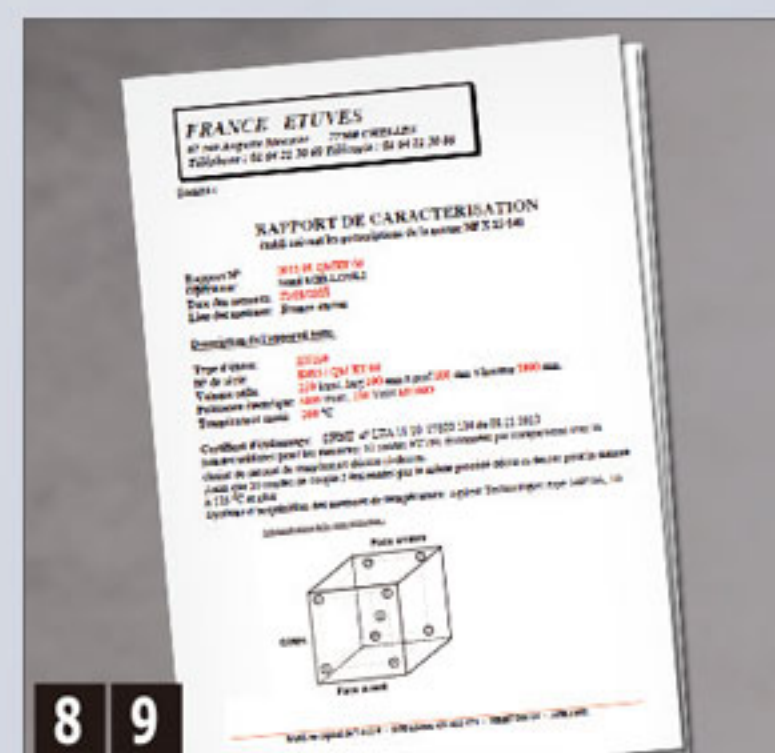


8 9 校準/均勻性檢測報告

配件

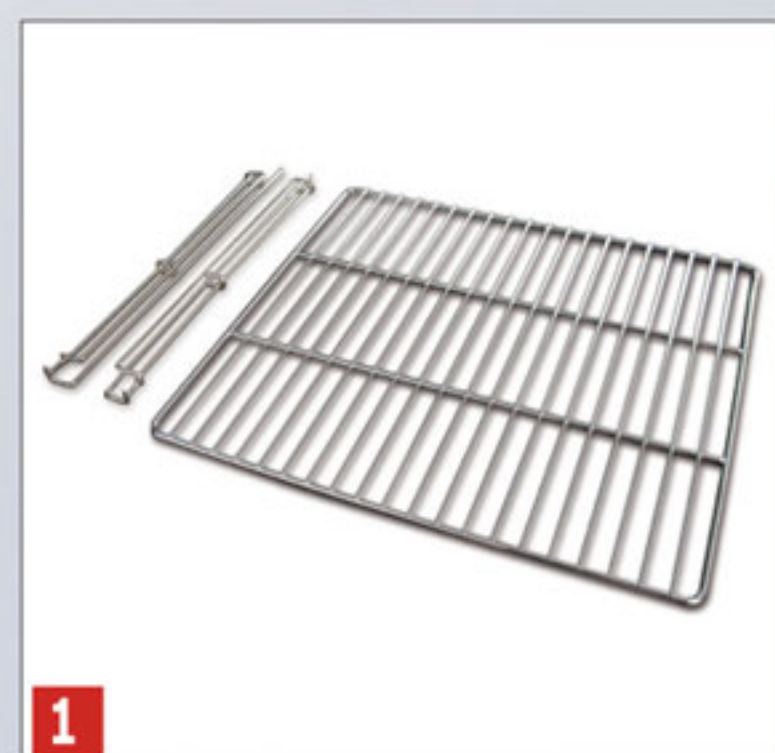

1 貨架網 (配有支架)

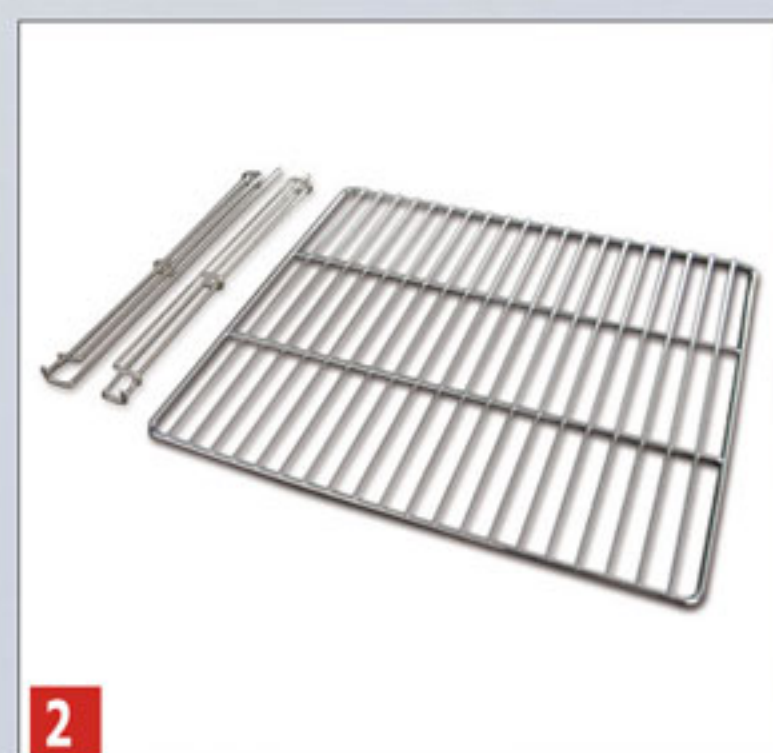


2 定制60KG承重貨架



3 固定高度底座



4 帶滾輪升高底座

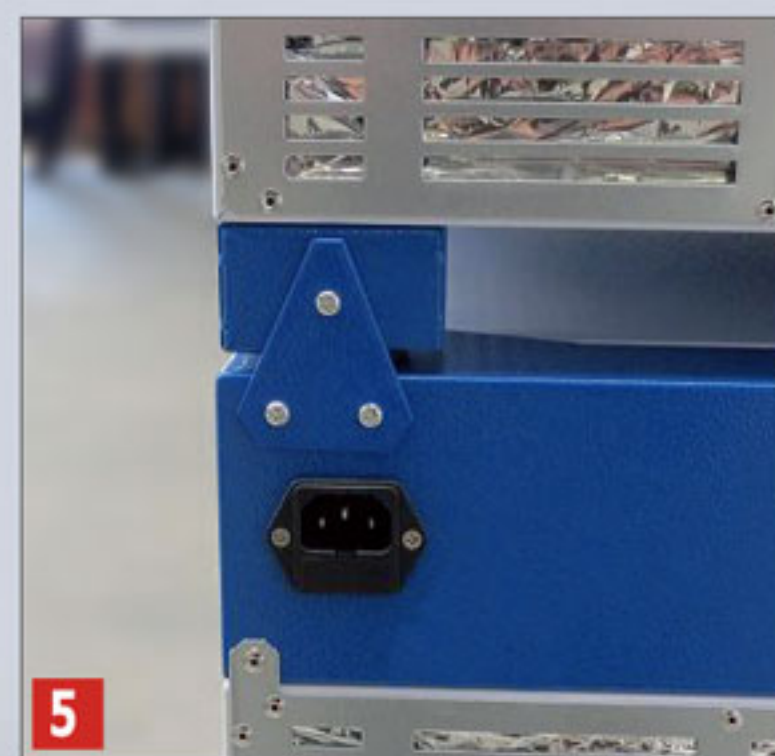

5 疊放架



6 回收槽



7 6線圖像顯屏記錄儀



8 玻纖套J型熱電偶

1 觀察窗
可實時觀察處理過程

2 電磁鎖
設備額外增加一套電磁鎖
一鍵解鎖

3 C6000觸屏溫控器
4.3寸觸摸顯示屏；共100個程序，每個程序16段，數據存儲功能，用戶管理權限

4 充氮裝置
加裝充氮裝置，可用於產品防氧化
手動調節充氮量

5 廢氣助排機
可將廢氣排到一個連接管內

6 降溫風機
可降低工作空間內的溫度
通過開關啟動

7 直徑60mm側開孔
位於烘箱左側，可通過電纜或溫度傳感器

8 出廠1個溫度點（105°C/150°C/200°C）校正
烘箱中心點所測溫度驗證報告
（FD X15-140標準）。

9 1個點（105°C/150°C/200°C）
溫度均勻性測試：烘箱內9個點所測溫度
驗證報告（FD X15-140標準）

10 關閉：鑰匙鎖緊結構

11 箱門打開時加熱和通風中止

1 貨架網 (配有支架)
為鋼鍍鉻材料製成
可裝載30kg貨物
可定制材質

2 貨架網
定制60kg承重網架

3 固定高度或有滾輪升高底座
4 (除去XUE032, XUE686, XUE980)
將烘箱升高到裝載的最佳高度
配有旋轉滾輪，可剎車

5 疊放架 (XUE032至XUE112)
可將體積相同的烘箱疊加放在一起。

6 回收槽
不鏽鋼，邊緣20mm，保護烘箱底

7 4線或6線便攜式圖像顯屏記錄儀
大顯屏圖像可實時跟蹤溫度變化
配有USB接口和RJ45電纜
4或6個移動傳感器接頭

8 玻纖套J型熱電偶
記錄儀配件



XUE490

XUE686

XUE980

技術參數

	XUE032	XUE058	XUE112	XUE225	XUE343	XUE490	XUE686	XUE980
內箱容積 (L)	32	58	112	225	343	490	686	980
尺寸								
內寬 (mm)	300	400	500	500	700	700	700	1000
內深 (mm)	270	360	450	450	700	700	700	700
內高 (mm)	400	400	500	1000	700	1000	1400	1400
外寬 (mm)	464	564	664	664	864	864	864	1164
外深 (mm)	566	656	746	746	1092	1092	1092	1092
外高 (mm)	694	694	794	1294	994	1294	1694	1694
加底座后箱底離地面高度	-	900	850	600	750	600	-	-
空箱重量 (kg)	39	50	65	84	123	148	178	258
箱門數量	1	1	1	1	1	1	1	2
性能								
溫度範圍 (°C)	+10°C 周邊溫度至 300°C							
溫度穩定性 (+/-°C)	< 0.2							
風機數目	1	1	1	2	1	1	2	2
最大換氣量 (m³/h)	5	5	6	6	9	6	32	32
出風口數目	1	1	1	1	1	1	1	1
出風口外直徑 (mm)	35	35	35	35	35	35	63	63
電氣性能								
加熱功率 (W)	1000	1500	1500	2000	3000	3000	4000	6000
電源	單相 220V ~1P 50/60Hz				單相 220V ~1P 50Hz			三相 380V ~3P +N 50Hz
連接電流 (A)	10	10	10	10	16	16	20	10
裝載貨架網								
最多數目	6	6	8	17	11	17	25	25
貨架網尺寸 (mm)	270x240	370x330	470x420	470x420	670x670	670x670	670x670	970x670
貨架網最大載重/烘箱最大總載重 (kg)	30 / 60	30 / 60	30 / 60	30 / 120	30 / 100	30 / 160	30 / 160	30 / 180

www.france-etuves.com

